

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

simpli-COLLECT™ Urine Collection Kit är avsett för självprovtagning och transport av urin för diagnostisk in vitro-analys. Urin kan samlas in och prepareras för transport på en vårdinrättning eller på annan plats av en lekman.

ANALYMETODENS BEGRÄNSNINGAR

Provtagningsskitet får endast användas för att samla in urinprover.

RIKTLINJER FÖR AVFALLSINSAMLING: SORTERAS SOM PAPPERSFÖRPACKNING OCH PLASTFÖRPACKNING		
Förpackningsmaterial	Symbol	Definition
Returkartong och ytteremballage	21 PAP	Övrig papp
Hållare för provrör och lock	1 PETE	Polyetentereftalat
Emballage till provrör och pipett	22 PAP 7 OTHER	Papper och etenvinyl-acetat (EVA)
Bruksanvisning	22 PAP	Papper
Fraktpåse	4 LDPE	Lågdensitetspolyeten
Ark med etikett till provrör och påse	22 PAP	Papper

Artiklar med återvinningssymbolen kan återvinnas. Följ gällande bestämmelser om kassering av avfall.

SYMBOLFÖRKLARING	
	Utropstecken
	Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
	In vitro-analys
	Listnummer
	Får ej återanvändas
	Temperaturbegränsning
	Sista förbrukningsdag
	Läs tillhörande dokumentation
	Öppna här
	Får inte användas om förpackningen är skadad. Läs tillhörande dokumentation.
	Viktig information
	Pipett
	Provrör med flytande buffert
	Internationellt artikelnummer
	Tillverkas av
	Lotnummer
	Minimi-/maximivolym för urin
	Biologiska risker
	Förvaras i
	Unikt id
	Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen/Europeiska unionen
	Tillverkare

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV ANALYSEN

Med simpli-COLLECT™ Urine Collection Kit kan du ta urinprover själv utan övervakning (exempelvis i hemmet eller på annan plats som inte är en klinisk miljö).

Du samlar in och överför provet till provröret och skickar det till laboratoriet för analys.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- FÖLJ ALLA ANVISNINGAR i bruksanvisningen. Om du inte följer anvisningarna kan resultatet bli felaktigt.
- Förvaras utom räckhåll för barn under 14 års ålder.
- ANVÄND INTE simpli-COLLECT™ Urine Collection Kit om förpackningen är skadad, öppen eller läcker. **KASSERA OANVÄNDA, SKADADE ELLER LÄCKANDE FÖRPACKNINGAR** i enlighet med gällande bestämmelser.
- ANVÄND INTE simpli-COLLECT Urine Collection Kit om förpackningen har passerat **SISTA FÖRBRUKNINGSDAG**.
- Provröret med flytande buffert innehåller rengöringsmedel.** Vätskan i röret kan orsaka allvarlig ögonirritation och lätt hudirritation. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen eller huden ska du skölja försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt och fortsatt att skölja. Om irritationen kvarstår, kontakta läkare. **VARNING:** Orsakar lätt hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation.
- Får ej förtäras.
- Undvik kontakt med hud och ögon.


FÖRVARING

Förvara förpackningen i rumstemperatur (mellan 15 °C och 30 °C eller 59 °F och 86 °F). Se till att alla provkomponenter håller rumstemperatur före användning.

Efter insamlingen ska provet förvaras i rumstemperatur (mellan 15 °C och 30 °C eller 59 °F och 86 °F).

SISTA FÖRBRUKNINGSDAG

ANVÄND INTE simpli-COLLECT™ Urine Collection Kit om förpackningen har passerat **SISTA FÖRBRUKNINGSDAG**.

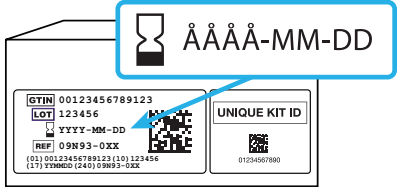

TEKNISK HJÄLP

Kontakta din vårdgivare vid frågor om returfrakt eller analysresultat/diagnos, eller för hjälp med att få ett nytt provtagningsskit.

Information om hur produkten ska användas och förvaras finns här:

www.molecular.abbott/int/en/home/simpli-collect



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

IVD För diagnostisk användning in vitro

Följande säkerhetsföreskrifter gäller för: provrör med flytande buffert	
	Varning
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H316	Orsakar lätt hudirritation.*
Förebyggande	
P264	Tvätta händerna grundligt efter användning.
Åtgärder	
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-linser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P332+P313	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.*
P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

*Gäller inte där förordningen EC 1272/2008 (CLP) har implemen-terats.

Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på:
www.molecular.abbott/int/en/home/simpli-collect

Abbott Sample Collection tillverkas för Abbott Molecular Inc. av MML Diagnostics Packaging, Inc., Troutdale, OR 97060 USA.

Abbott Molecular Inc. är tillverkare av simpli-COLLECT Urine Collection Kit.

simpli-COLLECT™ Urine Collection Kit importeras till Europeiska unionen av Abbott Diagnostics GmbH med adress Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Tyskland.

Abbott Molecular Inc.
1300 East Touhy Avenue
Des Plaines, IL 60018 USA

EC REP Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden, Germany

© 2024 Abbott. Alla rättigheter förbehålles.
Skapad juli 2024

simpli-COLLECT är ett varumärke som tillhör Abbott.
Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.



simpli-COLLECT™

Urine Collection Kit
Bruksanvisning

Behöver du hjälp? Skanna här:



www.molecular.abbott/int/en/home/simpli-collect

Läs igenom alla anvisningar innan du börjar.
Spara förpackningen. Den ska användas
för att skicka provet.

SV
REF 09N93-005
och högre
812258R02

