simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit
GID REFERANS POU PASYAN

KIT OU A GEN LADAN L BAGAY SA YO:
Yon tib echantiyon Alinity m; Yon ti eponj esteril pou koleksyon echantiyon

PREKOSYON: PA touche bout blan ti kouvè a epi PA mete kouvè a plat. Si ou touche pwent blan an oubyen si ou mete ti kouvè a atè oubyen li lage l, rezilta yo ka pa egzak. Ou bezwen mande yon nouvo simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit.


1. ENSTALASYON

1A Lave epi seche men ou.



1B Louvri kit ki gen tib la. Retire tib la. Mete anbalaj la sou yon sifas ki plat.

Kenbe tib la dwat epi retire bouchon an. Mete tib la louvri ak bouchon an tounen nan anbalaj la.

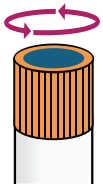


DEBOUCHE NAN SANS KONTRÈ

2. KOLEKSYON ECHANTIYON OU A

2A Louvri pake koton an epi kenbe l nan manch zoranj lan.

- Pa touche pwent blan an.

Pandan w ap itilize ti kouvè a, eseye pa touche pwent blan ti kouvè a ak anyen eksepte andedan vajen w.

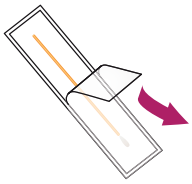

KENBE NAN MANCH ZORANJ LAN


2B Jwenn yon pozisyon konfòtab pou ou ka jwenn aksè fasil nan ouvèti vajen ou.

Kenbe ti sèvyèt la ak yon men. Avèk lòt men an, deplase pli po yo sou kote pou ou ka jwenn aksè nan ouvèti vajen ou.

Dousman mete pwent blan an nan ti kouvè a apeprè 2 pous (5 sentimèt) nan vajen ou.

Vire ti kouvè a dousman pandan 15-30 segonn (asire w ke ti kouvè a touche mi vajen w lan).

Retire ti sèvyèt la avèk prekosyon. **Pa mete ti koton an atè!**

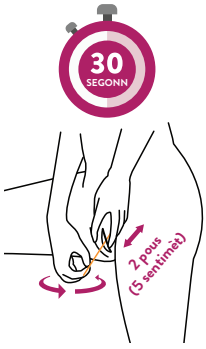

3. TRANSFÈ TI KOUVÈ A

3A Kenbe tib la dwat. Avèk pwent blan an anba, mete ti kouvè a nan tib la.

Kase manch coton zoranj lan lè w pliye manch lan kont tib la nan liy kase a. (Ou ka bezwen leve ti kouvè a yon ti kras pou jwenn liy kase a).




3B Jete moso anwo manch ti sèvyèt la!

Pati anba ti sèvyèt la ap rete nan tib la.



3C Kenbe tib la dwat epi fèmen bouchon an ankò lè w vire bouchon an nan sans zegwi mont lan. Lè ou santi rezistans, **kontinye vire** pou yon lòt ka vire jiskaske bouchon an pa deplase ankò.

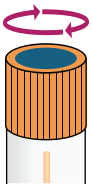

NAN SANS ZEGWI MONT LAN POU FE YON REZIME

3D Retounen tib transpò ki gen eponj lan bay founisè swen sante ou.

Avètisman ak prekosyon

- Pa sèvi ak simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit la si anbalaj la domaje oswa si sele a kase. Jete kit ki pa itilize oswa ki domaje yo dapre règleman lokal, eta ak federal yo.
- Pa sèvi ak simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit la apre dat ekspirasyon li.
- Sèvi sèlman ak tij koton zoranj ki nan simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit la pou kolekte echantiyon yo. Koton an dwe rete nan Tib Echantiyon Alinity m lan apre yo fin pran echantiyon an. Pa mete plizyè ti kouvè nan Tib Echantiyon Alinity m lan.
- simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit lan se yon aparèy pou itilize yon sèl fwa. Re-itilizasyon aparèy la oswa kontak pasyan an avèk yon ti kònèy ki te deja itilize ka potansyèlman ekspoze pasyan an a òganis enfeksyon.
- Evite touche tèt ble bouchon Alinity m ki ka pèse a pou anpeche kontaminasyon.
- Asire w ke bouchon Alinity m ki ka pèse a byen sele pou anpeche kontaminasyon potansyèl.
- Swiv pwosedi koleksyon echantiyon yo. Retire bouchon an anvan ou mete ti kouvè echantiyon an nan tib transpò a. Pa pouse yon ti kouvè pou kolekte echantiyon nan bouchon an.

Limitasyon pwosedi a

- Yo ka pran yon echantiyon nan yon vajin byen bonè oswa pita nan lavni.
- Fanm ansent pa ta dwe itilize simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit la.

Itilizasyon prevwa: simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit la fèt pou koleksyon ak transpò echantiyon prelèvman vajinal pa pasyan an pou fè tès ak tès Alinity m HR HPV a. Gade feyè ki nan pake tès Alinity m HR HPV a pou plis enfòmasyon. simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit lan pa fèt pou itilizasyon lakay.

Referans: simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit Feyè ki nan pake a: 53-608542/R02

MOLECULAR.ABBOTT

*Pou**itilizasyon dyagnostik in vitro.*. Rx Only.

© 2026 Abbott. Tout dwa yo rezève. Tout mak komèsyal yo mansyone pi wo a se mak komèsyal swa gwoup konpayi Abbott yo oswa pwopriyetè respektif yo. Nenpòt foto ki parèt yo se pou rezon ilistratif sèlman. Nenpòt moun ki parèt nan foto sa yo kapab yon modèl. MDx-26000467 10/26

Abbott