SIMPLI-COLLECT™ HPV COLLECTION KIT
ALAKAʻI KUHIKUHI NO KA MEA MAʻI

AIA I LOKO O KĀU PAHU NĀ MEA AʻE:
Hoʻokahi Paipu Hāpana Alinity m; Hoʻokahi Swab Hōʻiliʻili Hāpana Sterile

AKAHELE: MAI hoʻopā i ka piko keʻokeʻo o ka swab, a mai waiho i lalo i ka swab. Inā hoʻopā ʻia ka piko keʻokeʻo, a i ʻole waiho ʻia a hāʻule ka swab, ʻaʻole paha pololei kāu mau hopena. Pono ʻoe e noi i kahi hou simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit.


1. HOʻONOHONOHO ANA

1A Holoi a hoʻomaloʻo i kou mau lima.



1B E wehe i ka pahu me ka paipu. Wehe i ka paipu. E kau i ka ʻōpala ma luna o kahi pālahalaha.

E paʻa i ka paipu i luna a wehe i ke poʻi. E hoʻokomo i ka ʻōmole hāmama a hoʻihoʻi i ke poʻi i loko o ka ʻōpala.

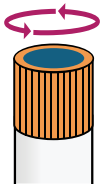


IHULI KA ʻAOʻAO ʻĀKAU KUʻE WEHE AI

2. KE ʻOHIʻOHI ʻANA I KĀU LAʻANA

2A E wehe i ka ʻeke swab a paʻa me ka lima swab ʻalani.

- Mai hoʻopā i ka wēlau keʻokeʻo.

ʻOiai e hoʻohana ana i ka swab, mai hoʻopā i ka piko keʻokeʻo o ka swab i kekahi mea koe wale nō ka ʻaoʻao o loko o kou pūhaka.

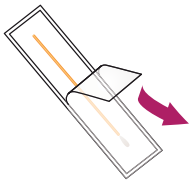

E PAʻA I KA LIMA ʻALANI

2B E huli i kahi kūlana ʻoluʻolu e hiki ai iā ʻoe ke komo maʻalahi i ka puka o kou pūhak.

E paʻa i ka swab me ka lima hoʻokahi. Me ka lima ʻē aʻe, e hoʻoneʻe i nā ʻili i waho o ke ala e komo ai i ka puka o kou pūhaka.

E hoʻokomo mālie i ka piko keʻokeʻo o ka swab ma kahi o 2 ʻīniha (5 kenimika) i loko o kou pūhaka.

E hoʻohuli mālie i ka swab no 15-30 kekona (e hōʻoia i ka hoʻopā ʻana o ka swab i nā paia o kou pūhaka).

E wehe pono i ka swab.
Mai waiho i ka swab i lalo!



Hoʻohana i Manaʻo ʻia: Ka simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit no ka hōʻiliʻili ponoʻī a me ka lawe ʻana i nā ʻāpana swab vaginal no ka hoʻāʻo ʻana me ka Alinity m HR HPV assay. E nānā i ka pūʻolo hoʻokomo o ka Alinity m HR HPV assay no ka ʻike hou aku. Ka simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit no ka hoʻohana ʻana ma ka home.

Kuhikuhi: simpli-E ʻOHIʻOHI™ Hoʻokomo Pūʻolo Pahu Hōʻiliʻili HPV: 53-608542/R02

3. SWAB HOʻOLOI

3A E paʻa i ka paipu i luna. Me ke poʻo keʻokeʻo e kuhikuhi ana i lalo, e hoʻokomo i ka swab i loko o ka ʻōmole.

E paʻa i ka lima swab ʻalani ma ke kulou ʻana i ka lima e kūʻē i ka paipu ma ka laina haki. (Pono paha ʻoe e hāpai iki i ka swab e ʻike ai i ka laina haki).




3B E hoʻolei aku i kēia ʻāpana o luna o ka ʻauamo swab!

E waiho ʻia ka lalo o ka swab i loko o ka paipu.



3C E paʻa i ka paipu i luna a hoʻopaʻa hou i ka paipu ma ka hoʻohuli ʻana i ke poʻi i ka ʻaoʻao ʻākau. Ke manaʻo ʻoe i ke kūʻē, **e hoʻomau i ka huli ʻana** ma kahi o kahi hapaha huli hou a hiki i ka wā e neʻe ʻole ai ke pāpale.

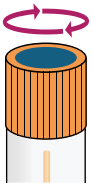

KA ʻAOʻAO ʻĀKAU E PANI HOU I KA UHI

3D E hoʻihoʻi i ka ʻōmole halihali me ka swab i kāu mea mālama ola.

Nā ʻōlelo aʻo a me nā hana palekana

- Mai hoʻohana i ka simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit inā ua hōʻino ʻia ka pūʻolo a inā paha ua haki ke sila. E hoʻolei aku i nā pahu i hoʻohana ʻole ʻia a i hōʻino ʻia paha e like me nā lula kūloko, mokuʻāina, a me ke aupuni pekelala.
- Mai hoʻohana i ka simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit ma mua o kona lā pau.
- E hoʻohana wale i ka swab ʻalani i hāʻawi ʻia ma ka simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit no ka hōʻiliʻili ʻana i nā hāpana swab. Pono e waiho ka swab i loko o ka Alinity m Paipu Laʻana ma hope o ka hōʻiliʻili ʻana i ka hāpana. Mai hoʻokomo i nā swab he nui i loko o ka Alinity m Paipu Laʻana.
- Ka simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit He mea hoʻohana hoʻokahi wale nō ka. ʻO ka hoʻohana hou ʻana i ka hāmeʻa a i ʻole ka hoʻopā ʻana o ka mea maʻi me kahi swab i hoʻohana mua ʻia e hiki ai ke hoʻopili i ka mea maʻi i nā meaola maʻi.
- Mai hoʻopā i ka piko polū o ka Alinity m Pierceable Cap e pale aku ai i ka hiki ke haumia.
- E hōʻoia i ka sila paʻa ʻana o ka Alinity m Pierceable Cap e pale aku ai i ka hiki ke haumia.
- E hahai i nā kaʻina hana o ka hōʻiliʻili ʻana i nā hāpana. E wehe i ke poʻi ma mua o ke kau ʻana i ka swab hōʻiliʻili laʻana i loko o ka ʻōmole halihali. Mai hoʻokomo i kahi swab hōʻiliʻili hāpana ma o ke poʻi.

Nā palena o ke kaʻina hana

- Ua kaupalena ʻia ke noi ʻana no ka swab pūhaka i hōʻiliʻili ponoʻī ʻia i nā keʻena mālama ola kino kahi e loaʻa ai ke kākoʻo a me ke aʻo ʻana e wehewehe i nā kaʻina hana a me nā hana palekana.
- ʻAʻole pono nā wahine hāpai e hoʻohana i ka simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit.

MOLECULAR.ABBOTT

No *i loko o ka lumi hoʻomoʻa* hoʻohana no ka ʻike ʻana. Rx wale nō.

© 2026 Abbott. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau. ʻO nā hōʻailona kālepa a pau i ʻōlelo ʻia he mau hōʻailona kālepa ia no ka hui ʻo Abbott a i ʻole nā mea nona lākou. ʻO nā kiʻi i hōʻike ʻia no nā kumu hoʻākāka wale nō. ʻO kekahi kanaka i hōʻike ʻia i loko o ia mau kiʻi he kumu hoʻohālike paha. MDx-26000466 10/26

Abbott