SIMPLI-COLLECT™ HPV COLLECTION KIT
GIYA TI PASIENTE A PANGREPERENSIAAN

TI KIT YO KET ADDA KADAGITI SUMAGANAD:
Maysa nga Alinity m Sample Tube; Maysa a Sterile a Swab para iti Panagurnong ti Specimen

PAKDAAR: SAAN a sagiden ti puraw a tuktok ti swab wenno ikabil iti rabaw. No masagid ti puraw a tuktok wenno maikabil wenno matnag ti swab, mabalin a saan a husto dagiti resulta yo. Masapul a dumawat kayo iti baro a simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit.


1. PANAGSAGANA

1A Buggoan ken namagaanyo dagiti ima yo.



1B Luktanyo ti kit a naglaon iti tubo. Alaenyo ti tubo. Ikabilyo ti pakete iti patad a rabaw.

Tengngelenyo a siuurnos ti tubo ken ikkatenyo ti takip. Ikabilyo manen ti nalukatan a tubo ken ti takip iti pakete.

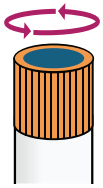


IYALYO ITI MAIKONTRA ITI ORAS TAPNO MAIKKAT TI TAKIP

2. PANAGALA TI SAMPLE YO

2A Luktanyo ti pakete ti swab ken tengngelenyo babaen iti kahel a paggenggeman ti swab.

- Saan a sagiden ti puraw a tuktok.

Bayat ti panagusar iti swab, padasenyo a saan a mapasagid ti puraw a tuktok ti swab iti aniaman a banag no di ket iti uneg laeng ti vagina yo.

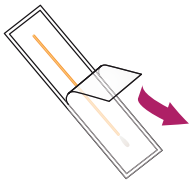

TENGNGELEN BABAEN ITI KAHEL A PAGGENGGEMAN

2B Agsapul iti natalged ken komportable a posisyon tapno nalaka a maakses ti sirok ti vagina yo.

Tengngelenyo ti swab babaen iti maysa nga ima. Babaen iti sabali nga ima, iyadayo dagiti nakulob a kudil tapno maakses ti sirok ti vagina yo.

Nalaka laeng nga isrek ti puraw a tuktok ti swab iti agarup 2 pulgadas (5 cm) iti uneg ti vagina yo.

In-inut nga iyalliliko ti swab iti uneg iti 15–30 segundos (siguradoen a masagid ti swab dagiti pader ti vagina yo).


Alaen a naannad ti swab.
Saan nga ikabil iti rabaw ti swab!



3. ITUDING TI SWAB ITI TUBO

3A Tengngelen a nakatindeg ti tubo. Iti panangiturong ti puraw a tuktok a nakatungtong iti rabaw, isrek ti swab iti uneg ti tubo.

Puggaten ti kahel a paggenggeman ti swab babaen iti panangiliko/panagbengngat ti paggenggeman kontra iti tubo iti linia ti panagpungtot. (Mabalin a masapul a itaas-itaas a nalaka ti swab tapno makita ti linia ti panagpungtot).

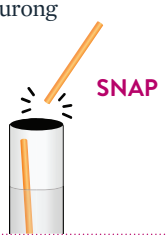


3B Ibelleng dayta ngato a paset ti paggenggeman ti swab!

Ti baba a paset ti swab ket agtalinaed iti uneg ti tubo.



3C Tengngelen a nakatindeg ti tubo ken takpan manen ti tubo babaen iti panagiliko ti takip iti direksiyon a maitutop iti oras (clockwise). No mariknam ti panagresist, **ipatuloy nga** iliko pay iti agarup maysa a quarter turn agingga a saanen a aggun-od ti takops.

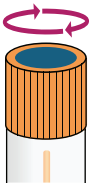

IYALYO ITI DIREKSIYON TI ORAS TAPNO MAITAKOP MANEN

3D Ipaay ti transport tube nga addaan ti swab iti healthcare provider yo.

Dagiti Pakdaar ken Pagannadanan

- Saan nga usaren ti simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit no nadadael ti pakete wenno no naburak ti panagtakop (seal). Ibelleng dagiti saan a naaramat wenno nadadael a kit sigun kadagiti lokal, estado, ken pederal a paglintegan.
- Saan nga usaren ti simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit no nalpasen ti petsa ti panagpaso (expiration date).
- Usaren laeng ti kahel a paggenggeman (orange shaft) a swab a naipaay iti simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit para iti panagkolekta ti swab specimen. Ti swab ket masapul nga agtalinaed iti Alinity m Sample Tube kalpasan ti panagkolekta ti specimen. Saan nga ikabil dagiti ad-adu a swab iti Alinity m Sample Tube.
- Ti simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit ket maysa a aparato a pangmaysa a panagusar laeng. Panangaramid manen iti aparato wenno panagkikinnay iti pasyente iti dati a naaramat a swab ket mabalin a mangipababa iti peligro ti panagwaras dagiti makapagsakit a organism.
- Liklikanyo ti panagsagid iti asul a parte ti Alinity m Pierceable Cap tapno maiwasan ti posibleng panagkontamina.
- Siguradoen a naurnos ken naurnay ti panagtakop ti Alinity m Pierceable Cap tapno maiwasan ti kontamina.
- Suroten a naannad dagiti proseso ti panagkolekta ti specimen. Ikkaten ti takop sakbay nga ikabil ti swab ti specimen iti transport tube. Saan a ipit wenno itulod ti swab iti babaen ti takop.

Dagiti limitasyon ti proseso:

- Ti panagusar ti bukod a nakolekta a vaginal swab specimen ket maipakat laeng kadagiti health care facility nga adda suporta ken counseling tapno maipaliwanag dagiti proseso ken pagannad.
- Saan a masapul nga usaren dagiti mabun-ag (pregnant) a babbai ti simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit.

Naituding a Panagusar: Ti simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit ket naituding para iti bukod a panagkolekta ken panagiyakar dagiti vaginal swab specimen para iti panagsubok babaen iti Alinity m HR HPV assay. Kitaen ti package insert ti Alinity m HR HPV assay para iti nayon nga impormasion. Ti simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit ket saan a naituding para iti panagusar iti pagtaengan.

Pakairaman: simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit Package Insert: 53-608542/R02

MOLECULAR.ABBOTT

Para *iti in vitro* diagnostic a panagusar. Rx Laeng.

© 2026 Abbott. Amin a karbengan ket naipreserba. Amin a trademark a naipakita ket trademark ti Abbott a grupo dagiti kompanya wenno dagiti bukodda a nagannak. Aniaman a retrato a naipakita ket para laeng iti panangiladawan. Aniaman a tao a naipakita kadagiti kastoy a retrato ket mabalin a modelo laeng.
MDx-26000463 10/26

Abbott