SIMPLI-COLLECT™ HPV COLLECTION KIT
患者リファレンスガイド

本キットには次のものが含まれています。
Alinity m サンプルチューブ 1 本、滅菌検体採取スワブ 1 本

注意：綿棒の先端の白い部分に触れたり、綿棒を置いたりしないでください。先端の白い部分に触れたり、綿棒を置いたり落としたりすると、結果が不正確になる可能性があります。新しい simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit を依頼する必要があります。


1. 準備

1A 手を洗って乾かします。



1B チューブが入っているキットを開けます。チューブを取り出します。パッケージを平らな面に置きます。

チューブを直立させた状態で保持し、キャップを取り外します。開いたチューブとキャップをパッケージの中に戻します。

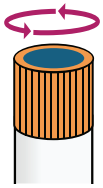


キャップを反時計回りに回して取り外す

2. サンプルの採取

2A 綿棒のパッケージをはがして開け、オレンジ色の持ち手部分を持ちます。

- 白い先端には触れないでください。

綿棒を使用している間は、綿棒の白い先端が膣の内側以外のものに触れないようにしてください。

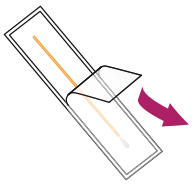

オレンジ色の持ち手部分を持つ

2B 膣口に容易に届くよう、楽な姿勢を取ってください。

片手で綿棒を持ちます。もう一方の手で皮膚のひだをよけ、綿棒が膣口に届くようにします。

綿棒の白い先端を膣内に約 5 cm（2 インチ）ゆっくりと挿入します。

綿棒を 15～30 秒間やさしく回転させてください（綿棒が膣壁に触れていることを確認します）。

綿棒を慎重に取り外します。
綿棒を置かないでください。



3. 綿棒を移す

3A チューブを直立させた状態で保持します。白い先端を下に向けて、綿棒をチューブに入れます。

綿棒のオレンジ色の持ち手部分を、ブレークラインの位置でチューブに押し当てながら曲げて折ります（ブレークラインを見つけるには、綿棒を少し持ち上げる必要がある場合があります）。




3B 綿棒の持ち手の上側の部分は廃棄してください。

綿棒の下側はチューブ内に残します。



3C チューブを直立させて保持し、キャップを時計回りに回してチューブを再度閉めてください。抵抗を感じたら、キャップがそれ以上動かなくなるまで、**さらに**約 4 分の 1 回転、回してください。

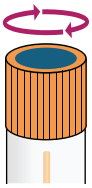

時計回りに回して再度閉める

3D 綿棒が入った輸送用チューブを医療従事者に返送してください。

警告及び使用上の注意

- パッケージが損傷している場合、またはシールが破損している場合は、simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit を使用しないでください。未使用のキットまたは破損したキットは、地域、州、および連邦の規制に従って廃棄してください。
- simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit は、使用期限を超えて使用しないでください。
- スワブ検体の採取には、simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit に付属しているオレンジ色の軸の綿棒のみを使用してください。検体採取後、綿棒は Alinity m サンプルチューブの中に保持しておく必要があります。Alinity m サンプルチューブに複数の綿棒を入れないでください。
- simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit は、単回使用デバイスです。デバイスを再使用したり、以前に使用した綿棒を患者に接触させると、患者が感染性微生物にばく露される可能性があります。
- 汚染の可能性を防ぐため、Alinity m Pierceable Cap の青色の上部に触れないでください。
- 汚染の可能性を防ぐため、Alinity m Pierceable Cap がしっかり密閉されていることを確認してください。
- 検体採取手順に従ってください。検体採取用の綿棒を輸送用チューブに入れる前に、キャップを外してください。検体採取用の綿棒をキャップに押し込まないでください。

手順の制限事項

- 自己採取した膣スワブ検体の使用は、手順および注意事項を説明するための支援およびカウンセリングが可能な医療施設に限定されます。
- 妊娠中の方は、simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit を使用しないでください。

使用目的：simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit は、Alinity m HR HPV アッセイで検査するための膣スワブ検体を自己採取し、輸送することを目的としています。追加情報については、Alinity m HR HPV アッセイの添付文書を参照してください。simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit は、家庭での使用を目的としたものではありません。

参考資料：simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit の添付文書：53-608542/R02

MOLECULAR.ABBOTT

体外診断用医薬品。医師の指示のもとでのみ使用可。

© 2026 Abbott. All rights reserved. 記載されているすべての商標は、アボットグループまたはその所有者に帰属します。表示されている画像はイメージです。写真に写っている人物はすべてモデルです。 MDx-26000452 10/26

Abbott