НАБОР ДЛЯ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦОВ НА ВПЧ SIMPLI-COLLECT™ HPV COLLECTION KIT

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

НАБОР СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:
одна пробирка Alinity m для образца; один стерильный тампон для взятия образца

ВНИМАНИЕ! НЕ касайтесь белого кончика тампона и НЕ кладите тампон на поверхность. Если коснуться белого кончика тампона, положить или уронить тампон, результаты могут быть неточными. В этом случае необходимо запросить новый набор simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit.


1. ПОДГОТОВКА

1A Вымойте и высушите руки.



1B Откройте набор, содержащий пробирку. Извлеките пробирку. Положите упаковку на плоскую поверхность.

Удерживая пробирку в вертикальном положении, снимите крышку. Уберите открытую пробирку и крышку обратно в упаковку.

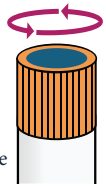


ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, ЧТОБЫ ОТКРУТИТЬ КРЫШКУ

2. ВЗЯТИЕ ОБРАЗЦА

2A Вскройте упаковку с тампоном и возьмите тампон за оранжевый стержень.

- Не касайтесь белого кончика.

При использовании тампона старайтесь не прикасаться белым кончиком ни к чему, кроме внутренней поверхности влагалища.

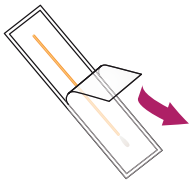

ДЕРЖИТЕ ЗА ОРАНЖЕВЫЙ СТЕРЖЕНЬ

2B Примите удобное положение для легкого доступа ко входу во влагалище.

Возьмите тампон одной рукой. Другой рукой раздвиньте складки кожи, прикрывающие вход во влагалище.

Осторожно введите белый кончик тампона во влагалище примерно на 5 см (2 дюйма).

Осторожно проворачивайте тампон в течение 15–30 секунд (убедитесь, что тампон касается стенок влагалища).

Аккуратно извлеките тампон.
Не кладите тампон на поверхность!



3. ПЕРЕНОС ТАМПОНА

3A Держите пробирку в вертикальном положении. Поместите тампон в пробирку белым кончиком вниз.

Сломайте оранжевый стержень тампона по линии надлома, согнув его о край пробирки. (При необходимости приподнимите тампон, чтобы найти линию надлома.)




3B Утилизируйте верхнюю часть стержня тампона!

Нижняя часть тампона останется в пробирке.



3C Удерживая пробирку в вертикальном положении, закройте ее крышкой и закрутите крышку по часовой стрелке. Когда почувствуете сопротивление, **поверните крышку** еще примерно на четверть оборота до полной фиксации.

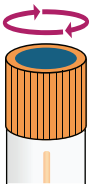

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ЧТОБЫ ЗАКРУТИТЬ КРЫШКУ

3D Передайте транспортировочную пробирку, в которой находится тампон, медицинскому работнику.

Предупреждения и меры предосторожности

- Не используйте набор simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit, если его упаковка повреждена или нарушена ее герметичность. Неиспользованные или поврежденные наборы необходимо утилизировать в соответствии с местными, региональными и федеральными нормативными требованиями.
- Не используйте набор simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit после истечения срока годности.
- Для взятия мазков используйте только тампон с оранжевым стержнем, входящий в набор simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit. После взятия образца тампон должен оставаться в пробирке Alinity m. Не помещайте несколько тампонов в одну пробирку Alinity m.
- Набор simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit предназначен для однократного применения. Повторное использование изделия или контакт пациента с ранее использованным тампоном потенциально может привести к заражению пациента инфекционными микроорганизмами.
- Старайтесь не касаться синей верхней части прокалываемой крышки пробирки Alinity m во избежание возможного загрязнения.
- Убедитесь, что пробирка Alinity m плотно закрыта прокалываемой крышкой во избежание возможного загрязнения.
- Соблюдайте инструкции по взятию образца. Перед тем как поместить тампон для взятия образца в транспортировочную пробирку, снимите с нее крышку. Не проталкивайте тампон для взятия образца через крышку.

Ограничения процедуры

- Самостоятельное взятие образцов влагалищных мазков допускается только в медицинских учреждениях, в которых предоставляются поддержка и консультации по поводу процедур и мер предосторожности.
- Набор simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit не следует использовать беременным женщинам.

Назначение. Набор simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit предназначен для самостоятельного взятия и транспортировки образцов влагалищных мазков с целью анализа с использованием теста Alinity m HR HPV. Дополнительную информацию см. в инструкции по применению теста Alinity m HR HPV. Набор simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit не предназначен для домашнего использования.

Источник. Инструкция по применению набора simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit: 53-608542/R02

MOLECULAR.ABBOTT

***Для диагностики in vitro.* Только по предписанию врача.**

© 2026 Abbott. Все права защищены. Все упомянутые здесь товарные знаки являются товарными знаками группы компаний Abbott или соответствующих владельцев. Все фотографии представлены исключительно в иллюстративных целях. Люди, изображенные на таких фотографиях, могут являться моделями. MDx-26000465 10/26

Abbott