SIMPLI-COLLECT™ HPV COLLECTION KIT
患者参考指南

试剂盒包含以下物品：
一支 Alinity m 样本管；一个无菌样本采集拭子

警告：请勿触碰拭子的白色端头，也不要将拭子平放。如果触碰到白色端头，或者平放拭子或掉落，检测结果可能会不准确。
您需要申请新的 simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit。


1. 准备工作

1A 洗净并擦干双手。



1B 拆开装有样本管的试剂盒。取出样本管。将包装放在平坦的表面。

保持管直立，取下管盖。将拆开的管和管盖放回包装中。

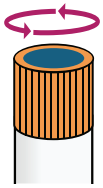


逆时针打开管盖

2. 采集样本

2A 撕开拭子包装袋，握住橙色拭子的柄部。

- 请勿触碰白色端头。

使用拭子时，不要让拭子的白色端头接触到除阴道内部之外的任何东西。

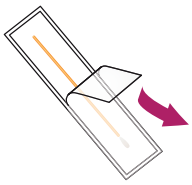

握住橙色拭子的柄部

2B 采取一个舒适的姿势，方便轻松接触阴道口。

一只手握住拭子。另一只手拨开皮肤褶皱，暴露阴道口。

将拭子的白色端头轻轻插入阴道约 2 英寸 (5 cm)。

轻轻旋转拭子 15-30 秒（确保拭子接触到阴道壁）。

小心取出拭子。
请勿将拭子放置于任何表面！



3. 转移拭子

3A 保持管直立。将拭子的白色端头朝下，放入管内。


将橙色拭子的柄部在管折断线处弯折并折断。（您可能需要轻轻提起拭子以找到折断线）。



3B 将拭子柄的顶部丢弃！
拭子的底部会保留在管内。



3C 保持管直立，顺时针拧紧管盖。当感觉到阻力时，**继续拧**约四分之一圈，直至管盖无法再转动。

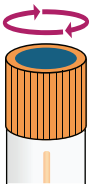

顺时针拧紧管盖

3D 将装有拭子的运输管交还给医疗服务提供方。

警告和注意事项

- 如果包装破损或密封件破裂，请勿使用 simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit。未使用或已损坏的试剂盒应根据当地、州和联邦法规进行弃置。
- 请勿在有效日期后使用 simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit。
- 仅可使用 simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit 提供的橙色杆拭子采集拭子样本。样本采集后，拭子必须保留在 Alinity m 样本管内。请勿在 Alinity m 样本管中放入多个拭子。
- simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit 为一次性使用设备。重复使用该设备或患者接触已使用过的拭子，可能使患者暴露于感染性病原体。
- 避免触碰 Alinity m 可穿刺盖的蓝色顶部，以防潜在污染。
- 确保 Alinity m 可穿刺盖密封严密，以防潜在污染。
- 请遵循样本采集流程。将样本采集拭子放入运输管前，应先取下管盖。请勿将样本采集拭子直接穿过管盖。

操作局限性

- 自行采集的阴道拭子样本操作仅适用于可提供操作流程和注意事项指导及咨询服务的医疗机构。
- 孕妇不得使用 simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit。

适用范围：simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit 适用于自行采集和运输阴道拭子样本，以通过 Alinity m HR HPV 检测试剂盒进行检测。更多信息请参阅 Alinity m HR HPV 检测试剂盒包装说明书。simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit 不适用于家庭使用。

参考：simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit 包装说明书：53-608542/R02

MOLECULAR.ABBOTT
供体外诊断使用。仅凭处方销售。

© 2026 Abbott。保留所有权利。所有提及的商标均为 Abbott 集团公司或其各自所有者的商标。展示的任何照片仅用于说明。此类照片中展示的任何人物均为模特。MDx-26000453 10/26

Abbott