simpli-COLLECT™ HPV COLLECTION KIT
INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

SU KIT CONTIENE LO SIGUIENTE:
Un Alinity m Sample Tube (tubo de muestra); Un hisopo estéril para la recogida del espécimen

PRECAUCIÓN: NO toque la punta blanca del hisopo ni lo apoye en ninguna superficie. Si toca la punta blanca o si el hisopo se apoya sobre alguna superficie o se cae, los resultados obtenidos podrían no ser exactos. Tiene que pedir un nuevo simpli-COLLECT HPV Collection Kit.


1. PREPARACIÓN

1A Lávese y séquese las manos.



1B Abra el kit que contiene el tubo. Retire el tubo. Coloque el envase en una superficie lisa.

Sostenga el tubo en posición vertical y quite el tapón. Vuelva a meter el tubo abierto y el tapón en el envase.

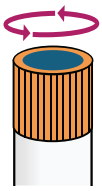


GIRE EN SENTIDO ANTIHORARIO PARA ABRIR EL TAPÓN

2. RECOGIDA DE LA MUESTRA

2A Abra el envase del hisopo y sosténgalo por la varilla naranja.

- No toque la punta blanca.

Mientras utiliza el hisopo, procure no tocar nada con la punta blanca, excepto el interior de la vagina.

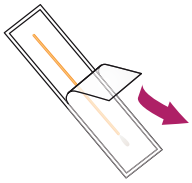

SUJÉTELO POR LA VARILLA NARANJA


2B Adopte una postura cómoda para acceder fácilmente a la abertura de la vagina.

Sostenga el hisopo con una mano. Con la otra mano, separe los pliegues de piel para acceder a la abertura de la vagina.

Introduzca con cuidado en la vagina la punta blanca del hisopo aproximadamente 5 cm (2 pulgadas).

Gire suavemente el hisopo durante 15 a 30 segundos (asegúrese de que el hisopo toca las paredes vaginales).

Extraiga el hisopo con cuidado. **¡No apoye el hisopo en ninguna superficie!**

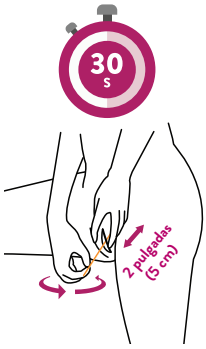

3. TRANSFERENCIA DEL HISOPO

3A Sostenga el tubo en posición vertical. Con la punta blanca apuntando hacia abajo, introduzca el hisopo en el tubo.

Rompa la varilla naranja del hisopo doblándola contra el tubo por la línea de rotura. (Es posible que deba elevar ligeramente el hisopo para encontrar la línea de rotura).




3B ¡Deseche la parte superior del hisopo!

La parte inferior del hisopo permanecerá dentro del tubo.



3C Sostenga el tubo en posición vertical y ciérrelo girando el tapón en sentido horario. **Cuando note resistencia,** siga girando el tapón otro cuarto de vuelta hasta que no gire más.

GIRE EN SENTIDO HORARIO PARA CERRAR EL TAPÓN

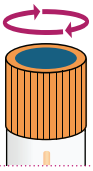

3D Lleve el tubo de transporte que contiene el hisopo a su profesional sanitario.

Advertencias y precauciones

- No utilice el simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit si el paquete está dañado o si el sello está roto. Deseche los kits dañados o no utilizados de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.
- No utilice el simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit después de su fecha de caducidad.
- Utilice solo el hisopo con varilla naranja proporcionado en el simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit para obtener muestras de hisopado. El hisopo debe permanecer en el tubo de muestras del Alinity m después de la obtención de la muestra. No coloque varios hisopos en el tubo de muestras del Alinity m.
- El simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit es un dispositivo de un solo uso. La reutilización del dispositivo o el contacto del paciente con un hisopo usado podría exponer al paciente a organismos infecciosos.
- Evite tocar la parte superior azul de la tapa perforable del Alinity m para evitar una posible contaminación.
- Asegúrese de que la tapa perforable del Alinity m se selle herméticamente para evitar una posible contaminación.
- Siga los procedimientos de obtención de muestras. Retire la tapa antes de colocar el hisopo para la obtención de muestras en el tubo de transporte. No presione el hisopo para la obtención de muestras a través de la tapa.

Limitaciones del procedimiento

- El uso de la muestra de autohisopado vaginal se limita a los centros de atención médica en los que se dispone de apoyo y asesoramiento para explicar los procedimientos y las precauciones.
- Las mujeres embarazadas no deben utilizar el simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit.

Uso previsto: el simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit está diseñado para la obtención propia y el transporte de muestras de hisopado vaginal para las pruebas con el Alinity m HR HPV Assay. Consulte el prospecto del envase de Alinity m HR HPV Assay para obtener más información. El simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit no está diseñado para uso doméstico.

Referencia: prospecto del envase del simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit: 53-608542/R02

MOLECULAR.ABBOTT

Sólo para uso en diagnóstico *in vitro*.

© 2026 Abbott. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia son marcas comerciales del grupo de empresas Abbott o de sus respectivos propietarios. La finalidad de las fotografías exhibidas es solo ilustrativa. Las personas que aparecen en dichas fotografías pueden ser modelos. MDx-25003996 10/26

Abbott