SIMPLI-COLLECT™ HPV COLLECTION KIT
مریض کے لیے گائیڈ

آپ کی کٹ میں درج ذیل اشیاء شامل ہوتی ہیں:
ایک Alinity m سیمپل ٹیوب؛ ایک جراثیم سے پاک نمونہ جمع کرنے والا سویب

تنبیہ: سویب کے سفید سرے کو نہ چھوئیں نہ ہی اسے نیچے رکھیں۔ اگر سفید نوک کو چھوا جاتا ہے یا نیچے رکھا یا گرا دیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے نتائج درست نہ آئیں۔ آپ کو ایک نئی simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit کی درخواست کرنی ہوگی۔


1. تیاری کرنا

1A اپنے ہاتھ دھوئیں اور خشک کریں۔



1B ٹیوب پر مشتمل کٹ کھولیں۔ ٹیوب ہٹائیں۔ پیکنگ کو ایک ہموار سطح پر رکھیں۔

ٹیوب کو سیدھا رکھیں اور ڈھکن ہٹا دیں۔ کھلی ٹیوب کو لگائیں اور ڈھکن کو واپس پیکیجنگ میں رکھیں۔

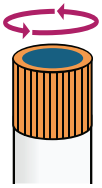


2. اپنا نمونہ لینا

2A سویب کے پیکیٹ کو چھیل کر کھولیں اور سویب کے نارنجی ہینڈل سے پکڑیں۔

- سفید سرے کو نہ چھوئیں۔

سویب کا استعمال کرتے وقت، کوشش کریں کہ سویب کی سفید نوک کو اندام نہانی کے اندرونی حصے کے علاوہ کسی اور جگہ نہ لگائیں۔

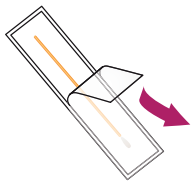

2B ایک آرام دہ پوزیشن میں بیٹھیں تاکہ اندام نہانی کے منہ تک آسانی سے رسائی کی جا سکے۔

سویب کو ایک ہاتھ سے پکڑیں۔ اندام نہانی کے منہ تک رسائی کے لیے، دوسرے ہاتھ سے جلد کی تہوں کو ہٹا دیں۔

سویب کی سفید نوک کو آہستہ سے اپنی اندام نہانی میں تقریباً 2 انچ (5 سینٹی میٹر) ڈالیں۔

15-30 سیکنڈ تک سویب کو آہستہ سے گھمائیں (یقینی بنائیں کہ سویب آپ کی اندام نہانی کی دیواروں کو چھوئے)۔

سویب کو احتیاط سے نکالیں۔
سویب کو نیچے نہ رکھیں!



3. سویب کو منتقل کرنا

3A ٹیوب کو اوپر کی طرف کر کے پکڑیں۔ سفید نوک کو نیچے کی طرف رکھتے ہوئے سویب کو ٹیوب میں ڈالیں۔

سویب کے نارنجی ہینڈل کو بریک لائن پر ٹیوب کے ساتھ موڑ کر توڑ دیں۔ (بریک لائن تلاش کرنے کے لیے آپ کو سویب کو تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہوگا)۔




3B سویب کے ہینڈل کے اس اوپری حصے کو پھینک دیں!

سویب کا نچلا حصہ ٹیوب میں رہے گا۔



3C ٹیوب کو سیدھا کھڑا رکھیں اور ڈھکن کو گھڑی کی سمت گھما کر دوبارہ بند کریں۔ جب آپ کو مزاحمت محسوس ہو تو**مزید تقریباً ایک چوتھائی چکر تک** گھماتے رہیں، یہاں تک کہ ڈھکن مزید حرکت نہ کرے۔

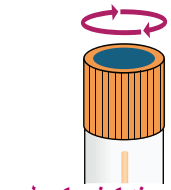

3D سویب والی ٹرانسپورٹ ٹیوب کو اپنے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو واپس بھیج دیں۔

انتباہات اور احتیاطی تدابیر

- اگر پیکج کھلا ہوا ہے یا سیل ٹوٹی ہوئی ہے تو simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit استعمال نہ کریں۔ غیر استعمال شدہ یا خراب کٹس کو مقامی، ریاستی، اور وفاقی ضوابط کے مطابق تلف کریں۔
- simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit کو اختتامی تاریخ کے بعد استعمال نہ کریں۔
- سویب نمونے جمع کرنے کے لیے صرف simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit میں فراہم کردہ نارنجی ٹنٹڈ والا سویب استعمال کریں۔ نمونہ جمع کرنے کے بعد سویب کو Alinity m سیمپل ٹیوب کے اندر ہی رکھنا چاہیے۔ Alinity m سیمپل ٹیوب میں ایک سے زیادہ سویب نہ رکھیں۔
- The simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit ایک بار قابل استعمال ٹیوانس ہے۔ ٹیوانس کو دوبارہ استعمال کرنا یا مریض کا پہلے استعمال شدہ سویب سے رابطے میں آنا ممکنہ طور پر مریض کو متعدی جراثیموں کے خطرے سے دوچار کر سکتا ہے۔
- ممکنہ آلودگی سے بچنے کے لیے Alinity m سوراخ کیے جانے کے قابل ڈھکن کے نیلے حصے کو چھونے سے گریز کریں۔
- یہ یقینی بنائیں کہ ممکنہ آلودگی سے بچاؤ کے لیے Alinity m سوراخ کیے جانے کے قابل ڈھکن مضبوطی سے بند ہو۔
- نمونہ جمع کرنے کے طریقۂ کار پر عمل کریں۔ نمونہ جمع کرنے والے سویب کو ٹرانسپورٹ ٹیوب میں رکھنے سے پہلے ڈھکن کو ہٹا دیں۔ نمونہ جمع کرنے والے سویب کو ڈھکن کے ذریعے اندر نہ دھکیلیں۔

طریقۂ کار کی حدود

- خود جمع کیے گئے اندام نہانی سویب کے نمونے کا اطلاق صرف ان صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات تک محدود ہے جہاں طریقۂ کار اور احتیاطی تدابیر کی وضاحت کے لیے معاونت اور مشاورت دستیاب ہو۔
- حاملہ عورتوں کو simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit کے استعمال سے گریز کرنا چاہئے۔

مطلوبہ استعمال: The simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit اندام نہانی کے سویب نمونوں کو خود جمع کرنے اور انہیں جانچ کے لیے منتقل کرنے کے مقصد سے Alinity m HR HPV تجزیہ کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اضافی معلومات کے لیے Alinity m HR HPV تجزیہ پیکج سے رجوع کریں۔ The simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit گھر میں استعمال کے لیے نہیں ہے۔

simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit :لہٰذا نسرٹا چیکیو R02/53-608542

MOLECULAR.ABBOTT

ان وٹرو تشخیصی استعمال کے لیے۔ Rx صرف۔

© 2026 Abbott. جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ تمام حوالہ شدہ مریڈ مارکس یا تو Abbott کمپنیوں کے گروپ یا ان کے متعلقہ مالکان کے ٹریڈ مارکہ سریں۔ دکھانگ ینتہ یماد مصاویر صرف وضاحتیۃ مقاصد کے لیے ہیں۔ تہ نامصاویر میں دکھائے گئے فاراد ممہ نکے کہ ماڈلز ہوں۔
MDx-26000451 10/26