SIMPLI-COLLECT™ HPV COLLECTION KIT
HƯỚNG DẪN THAM KHẢO CHO BỆNH NHÂN

BỘ SẢN PHẨM CỦA BẠN CÓ NHỮNG THÀNH PHẦN SAU:
Một Ống mẫu Alinity m; Một Tăm bông vô trùng để lấy mẫu

THẬN TRỌNG: KHÔNG chạm vào đầu màu trắng của tăm bông hoặc đặt tăm bông xuống. Nếu đầu màu trắng bị chạm vào hoặc tăm bông bị đặt xuống hoặc rơi, kết quả của bạn có thể không chính xác. Bạn cần yêu cầu simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit mới.


1. CHUẨN BỊ

1A Rửa và lau khô tay.



1B Mở ống chứa bộ sản phẩm. Tháo ống. Đặt bao bì lên bề mặt phẳng.

Cầm ống thẳng đứng và tháo nắp. Cho ống đã mở và nắp vào lại bao bì.

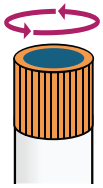


NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ ĐỂ THÁO NẮP

2. LẤY MẪU

2A Bóc mở gói tăm bông và cầm ở phần thân tăm bông màu cam.

- Không chạm vào đầu màu trắng.

Trong khi sử dụng tăm bông, hãy cố gắng không chạm đầu màu trắng của tăm bông vào bất kỳ vật gì trừ bên trong âm đạo của bạn.

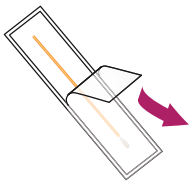

CẦM Ở PHẦN THÂN MÀU CAM

2B Tìm tư thế thoải mái để dễ dàng tiếp cận cửa âm đạo của bạn.

Cầm tăm bông bằng một tay. Dùng tay còn lại, vén nếp gấp da ra để tiếp cận cửa âm đạo.

Nhẹ nhàng đưa đầu trắng của tăm bông vào trong âm đạo khoảng 2 inch (5 cm).

Nhẹ nhàng xoay tăm bông 15-30 giây (đảm bảo tăm bông chạm vào thành âm đạo).

Cẩn thận lấy tăm bông ra.
Không đặt tăm bông xuống!



3. CHUYỂN TĂM BÔNG

3A Giữ ống thẳng đứng. Với phần đầu màu trắng hướng xuống, hãy đặt tăm bông vào ống.

Bẻ gãy phần thân màu cam bằng cách uốn cong tăm lên ống ở vạch bẻ. (Bạn có thể cần nhấc nhẹ tăm bông lên để tìm vạch bẻ).




3B Thải bỏ phần trên cùng này của tăm bông!

Phần dưới cùng của tăm bông sẽ nằm lại trong ống.



3C Cầm ống thẳng đứng và đậy nắp ống bằng cách vặn nắp theo chiều kim đồng hồ. Khi bạn cảm thấy có lực cản, hãy **tiếp tục vặn** khoảng một phần tư vòng đến khi nắp không thể di chuyển nữa.

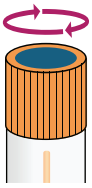

THEO CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ ĐỂ ĐẬY NẮP

3D Gửi lại ống vận chuyển chứa tăm bông cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Cảnh báo và thận trọng

- Không sử dụng simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit nếu bao bì bị hỏng hoặc nếu niêm phong bị phá vỡ. Thải bỏ bộ sản phẩm đã qua sử dụng hoặc hư hỏng theo quy định địa phương, tiểu bang và liên bang.
- Không sử dụng simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit quá ngày hết hạn.
- Chỉ sử dụng phần tăm bông màu cam được cung cấp trong simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit để lấy mẫu phết. Tăm bông phải nằm trong Ống mẫu Alinity m sau khi lấy mẫu. Không đặt nhiều tăm bông vào Ống mẫu Alinity m.
- simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit là thiết bị dùng một lần. Việc tái sử dụng thiết bị hoặc bệnh nhân tiếp xúc với tăm bông đã qua sử dụng có thể khiến bệnh nhân tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
- Tránh chạm phần màu xanh dương trên cùng của Nắp có thể đâm thủng Alinity m để ngăn nhiễm bẩn.
- Đảm bảo Nắp có thể đâm thủng Alinity m bịt kín để ngăn nhiễm bẩn tiềm ẩn.
- Tuân theo quy trình lấy mẫu. Tháo nắp trước khi đặt tăm bông lấy mẫu vào trong ống vận chuyển. Không ấn đẩy tăm bông lấy mẫu qua nắp.

Giới hạn của quy trình

- Việc tự lấy mẫu phết âm đạo chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế có cung cấp hỗ trợ và tư vấn để giải thích quy trình và các biện pháp phòng ngừa.
- Phụ nữ mang thai không nên sử dụng simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit.

Mục đích sử dụng: simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit được dùng để tự lấy mẫu và chuyển mẫu phết âm đạo để xét nghiệm bằng xét nghiệm Alinity m HR HPV. Tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng của xét nghiệm Alinity m HR HPV để biết thêm thông tin. simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit không được thiết kế để sử dụng tại nhà.

Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn sử dụng đi kèm simpli-COLLECT™ HPV Collection Kit: 53-608542/R02

MOLECULAR.ABBOTT

Dùng cho chẩn đoán *in vitro* (trong ống nghiệm). Chỉ bán theo đơn.

© 2026 Abbott. Bảo lưu mọi quyền. Tất cả nhãn hiệu được tham chiếu là nhãn hiệu của các công ty thuộc tập đoàn Abbott hoặc của chủ sở hữu tương ứng. Mọi ảnh được trình bày chỉ cho mục đích minh họa. Bất kỳ người nào được mô tả trong những ảnh như vậy có thể là người mẫu. MDx-26000468 10/26

Abbott